

Sistemul versatil de servetele uscate

Incidin® Wipes si Dispenser



ECOLAB®

Everywhere It Matters.™

Sistemul Incidin® Dry Wipes

Pentru curatarea si dezinfectia profesionala a tuturor tipurilor de suprafete



Sistemul Incidin Dry Wipes este compus dintr-un dispenser universal pentru servetele netesute, servetelele netesute Incidin Premium Wipes si/ sau Incidin Basic Wipes.

Incidin Wipes sunt proiectate a fi utilizate in combinatie cu produsele Ecolab pentru a crea un concept simplu si usor de utilizat pentru dezinfectia suprafetelor.

▲ Dispenser Incidin® Wipes:

- Reutilizabil si cu inchidere etansa, ce nu permite scurgeri de lichid
- Compatibil cu solutiile de lucru dezinfectante Ecolab
- Este prevazut cu orificii reglabile si capace disponibile in patru culori pentru diferite aplicatii.

▲ Incidin® Premium Wipes:

- Servetele netesute, de inalta calitate, nu lasa scame si sunt usor de utilizat
- Ambalate in role de 99 servetele - 20 x 38cm; 60 g/m²

▲ Incidin® Basic Wipes:

- Servetele netesute, de inalta calitate, cu proprietati excelente de curatare, datorita tipului de tesatura deschisa
- Ambalate n role de 99 servetele - 20 x 38cm; 40 g/m²

EFICIENTA OPTIMA SI FIABILITATE

Servetele Incidin Dry Wipes si solutiile de dezinfectie Ecolab sunt testate microbiologic si analizate in laborator pentru a asigura eficacitatea maxima.

Create special pentru a fi utilizate impreuna cu Incidin Pro, Incidin Extra N, Incidin Liquid si Incidin Foam. Sistemul este in acelasi timp adaptabil la o varietate de moduri individuale de lucru si protocoale de igiena.

Reumplerea se face simplu, fie automat cu ajutorul tehnologiei de dozare Ecolab - DG1/DG3 - fie manual.

Gama de produse inovatoare



Aplicare usoara,
in orice situatie



Suport si Service
complet



Promisiunea Ecolab



Gata de utilizare pentru toate suprafetele

Compatibilitate excelenta cu materialele

Utilizarea Sistemului Incidin Dry Wipes impreuna cu gama Incidin de la Ecolab, ofera siguranta unei solutii complete si validate pentru dezinfectia suprafetelor.

USOR DE UTILIZAT, SISTEM FLEXIBIL

Prin introducerea sistemului Incidin Wipes - un sistem usor de utilizat si flexibil pentru dezinfectie - se obtine si siguranta utilizarii solutiilor, cum sunt Incidin Pro, Incidin Extra N si Incidin Rapid. Toate acestea pot fi utilizate in diverse concentratii, iar Incidin Liquid si Incidin Foam se utilizeaza nediluate. Toate furnizeaza un nivel inalt de compatibilitate cu materialele, pe toate tipurile de suprafete intalnite in domeniul medical. Pentru mai multe informatii, va rugam sa cititi datele despre produs.

REUTILIZARE USOARA - REUMPLERE

Pentru orice reutilizare si reumplere cu servetele netesute, se folosesc etichetele auto-adezive de siguranta (furnizate cu Incidin Premium si Basic Wipes). Acestea sunt necesare pentru a se inregistra orice informatie esentiala (produs, data umplerii, etc.)

SISTEM DE CAPACE PE CODURI DE CULORI - PENTRU RECUNOASTEREA USOARA A TIPULUI DE PRODUS

Capacele sunt disponibile in urmatoarele culori: verde (culoare standard), galben, albastru si rosu (culori optionale).

Prin intermediul codurilor de culori, solutiile de dezinfectie si aplicatia lor specifica poate fi diferentiata foarte usor. Daca nu se mai utilizeaza capacele, nu trebuie inlocuita cutia in intregime, se poate inlocui, simplu, numai capacul.


ECOLAB Incidin® Wipes	
Product / Produkt / Produkt / Ürün / Toode / Produkta / Produkts / Протів / Протравек / Протів / Протравек / Производ / Термек / Протравек	Incidin
Use Concentration / Einsatzkonzentration / Concentration d'utilisation / Gebruikskonzentratie / Kullamini konsentratsioon / Ulytle sluzhenie / Kasutuslahuse kontsentratsioon / Koncentracija / Lietojamās koncentrācija / Apdozav / Aplikacijs koncentrācija / Dabovna razredina / Koncentracija / Polčasavališe koncentracija / Koncentracija za korišćenje / Radna koncentracija / Концентрация на работен разред / Истользуемая Концентрация	%
Date / Datum / Tarix / Data / Kuupäev / Datums / Ниспорудня / Datum / Дата	
4 weeks / Wochen / semaines / weken / hafta / tygodnie / nädalad / savantes / nedēļas / שבועות / tydzis / tydzina / hft / tjedna / nedelje / седмица / vardas / uzvārds / Овоца / Јмјено / Мено / Név / Ime / Yuse / Yuse	
Name / nom / Naam / Isim / imię / nazwisko / nimi / vardas / uzvārds / Овоца / Јмјено / Мено / Név / Ime / Yuse / Yuse	



Mod de utilizare



Puneti-va manusile si desfaceti capacul. Clatiti si curatati dispenserul cu solutia dezinfectanta inainte de umple.

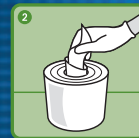


Scoateti rola de servetele din pachet, avand manusile pe maini, si trageți in afara primul servetel din mijlocul rolei.




Plasati rola de Incidin Premium/Incidin Basic Wipes in mijlocul dispenserului.



Solutiile dezinfectante Incidin (Incidin Pro, Incidin Extra N si Incidin Rapid) trebuie utilizate in concentratiile recomandate. Incidin Liquid si Incidin Foam se utilizeaza nediluate. Pentru un dispenser cu Incidin Premium Wipes solutia de impregnare va fi de minimum 2,5L, iar pentru Incidin Basic Wipes minimum 2,2L de solutie.

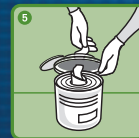

Treceti primul servetel prin orificiul capacului si apoi inchideti cutia dispenserului si cu capacul colorat. Din momentul impregnării cutiei cu solutie, asteptati 30 - 60 minute pentru a va sigura ca toate servetelele sunt impregnate corespunzator.

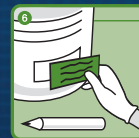

Servetelele impregnate pot fi utilizate pentru o perioada de pana la 28 de zile. Notati data maxima de utilizare pe eticheta de siguranta si lipiti-o pe recipient.



Date pentru comanda si informatii de contact

DESCRIERE	CANTITATE	AMBALARE	COD DE COMANDA
INCIDIN DRY WIPES SYSTEM			
1 Incidin® Wipes Dispenser	1 dispenser pe cutie	1	10010283
2 Incidin® Premium Wipes	1 rola x 99 servetele	6	10010279
3 Incidin® Basic Wipes	1 rola x 99 servetele	6	10010278
4 Incidin® Wipes Dispenser Lids bag	1 cutie x 3 capace (galben, rosu, albastru)	6	10015889
SOLUTII DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFETE - PENTRU UTILIZARE IN COMBINATIE CU DRY WIPE SYSTEM*			
Incidin® PRO	2L	3	3076620
Incidin® PRO	6L	1	3076730
Incidin® Extra N	6L	1	3054840
Incidin® Liquid	1L	12	3042450
Incidin® Liquid	5L	1	3041640
Incidin® Foam	750ml	16	3021800

*Informatii detaliate privind gama Incidin sunt disponibile pe www.ecolab.com sau la reprezentantul Dumneavoastra Ecolab.

UTILIZATI BIOCIDELE IN SIGURANTA. CITITI INTOTDEAUNA ETICHETA SI INFORMATIILE DESPRE PRODUS INAINTE DE UTILIZARE.



Servetelele Incidin Wipes sunt in mod curent utilizate cu produsele pentru dezinfectia suprafetelor Ecolab, insa pot fi de asemenea utilizate cu produse furnizate de alti producatori, daca acestia ofera date corespunzatoare privind compatibilitatea. Va rugam cititi recomandarile emise de fabricantii altor produse.

Mai multe informatii pot fi gasite pe www.ecolab.com

DISCUTATI CU REPREZENTANTUL DE VANZARI ECOLAB PENTRU ALTE INFORMATII SAU PENTRU COMENZI

ECOLAB HEALTHCARE EMEA
 Richtistrasse 7
 8304 Wallisellen
 Switzerland
www.ecolab.eu

Ecolab SRL
 Centrul de afaceri „IDEO”
 Șos. Păcurari nr. 138, et. 2, 700545 Iași
 Tel.: +40-232-2222100
www.ecolab.com